





DILATOMETRO LINEARE DI PRECISIONE

Dilatometro lineare di precisione

Questo dilatometro lineare di precisione è di facile utilizzo, molto robusto grazie alla sua base in alluminio.

La lettura della misura è chiara, grazie al micrometro (0-10 mm, 0.01 mm) fornito con lo strumento.

Il dilatometro lineare è fornito di due barre metalliche forate di differente materiale. Esse vengono riscaldate facendovi passare attraverso del vapore. La dilatazione è misurata tramite un micrometro e la temperatura tramite un termometro a contatto con la barra. In questo modo si avranno tutte le informazioni necessarie per la determinazione del coefficiente di dilatazione termica del materiale di cui è fatta la barra.

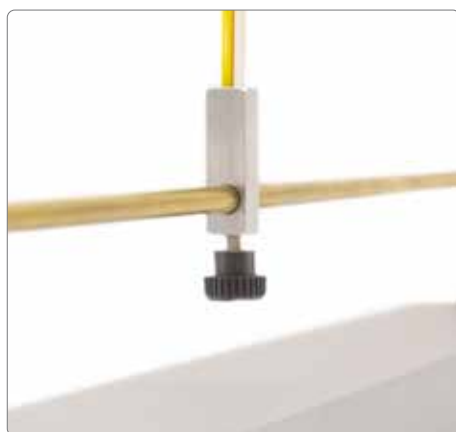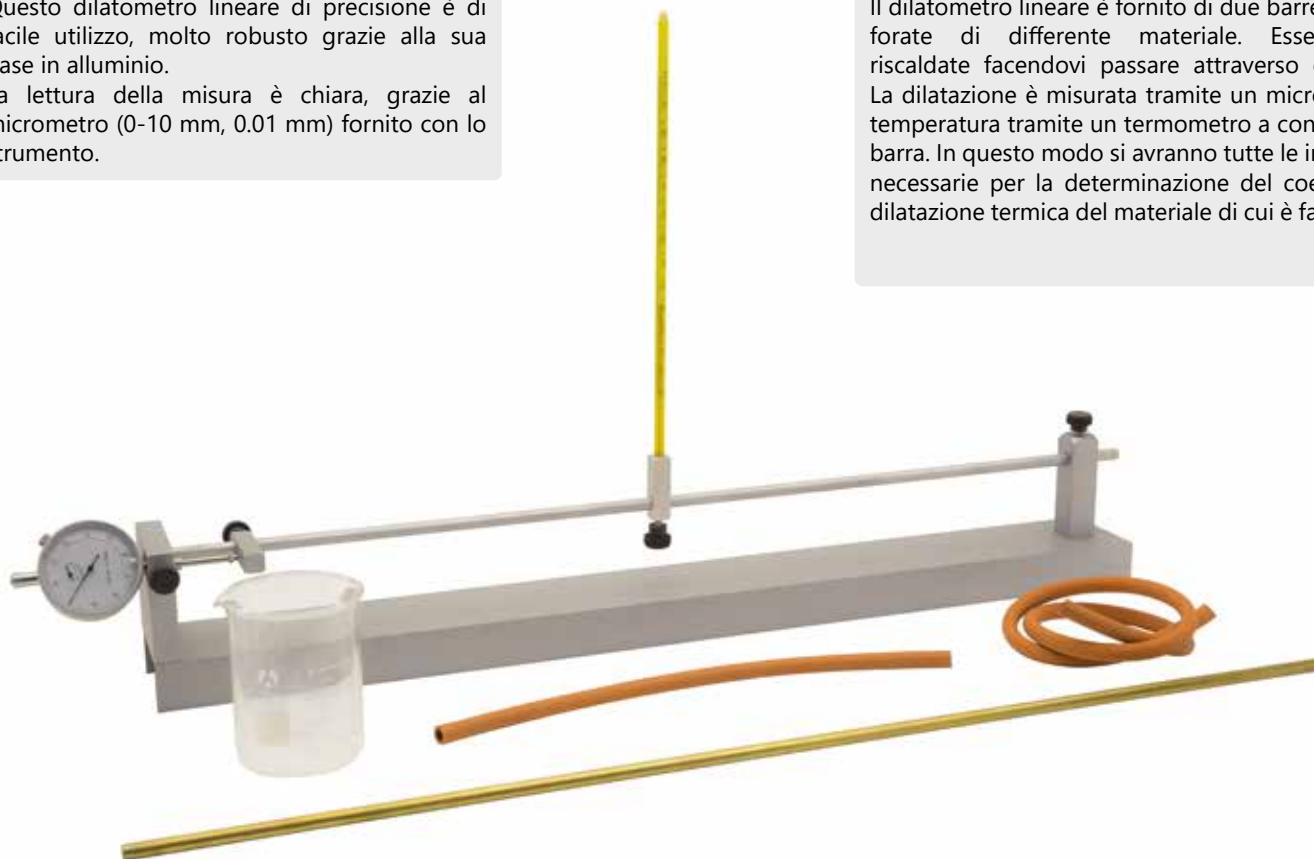

Materiale in dotazione

- Base con supporto (700 x 70 mm)
- Barra di alluminio 700 mm
- Barra di ottone 700 mm
- Comparatore
- Termometro

Materiale necessario non in dotazione

- Kit generatore di vapore:
- Piastra riscaldante
 - Tappo di gomma
 - Pallone filtrazione

